



DAYVUE ⁵⁷ with *BioMoist*

SORRIDI AL COMFORT!

La speciale formula BioMoist riproduce la naturale condizione dell'occhio, garantendo un'esperienza di porto della lente a contatto più piacevole e confortevole

LA FORMULA BIOMOIST

è una soluzione idratante contenente idrossipropilmetilcellulosa (HPMC) e polietilenglicole (PEG), che insieme imitano il film lacrimale naturale dell'occhio. La combinazione di questi agenti umettanti superiori fornisce una sensazione morbida e setosa che aiuta a ottimizzare il comfort al momento dell'inserimento iniziale della lente. La soluzione BioMoist appositamente formulata rilascia l'umidità quando è più necessaria, con conseguente comfort superiore per l'intera giornata. BioMoist contiene anche agenti detergenti

esclusivi che aiutano a resistere all'accumulo di proteine e lipidi sulla superficie della lente, migliorando ulteriormente l'esperienza complessiva dell'uso della lente.

La formula BIOMOIST viene integrato nel materiale delle lenti durante la fase di idratazione, per mantenere l'idratazione per tutto il giorno e avere una maggiore resistenza all'accumulo di proteine e lipidi. La formula BIOMOIST è miscelata anche nella soluzione salina di immersione in blister per un miglior comfort iniziale e una riuscita di applicazione al 100%.



DAYVUE ⁵⁷
with *BioMoist*

TECNOLOGIA RADIAL EDGE

Lo spessore della lente sulla curva periferica è stato ridotto al minimo per offrire comfort e prestazioni ottimali. Il bordo con design asferico della superficie anteriore è stato realizzato con un raggio di 0,025 mm per fornire una transizione graduale con la superficie posteriore



RIVESTIMENTO IN LINEA AL PLASMA

Questa lente utilizza una tecnologia di rivestimento in linea al plasma applicata durante il processo automatizzato di stampaggio. Il rivestimento al plasma è essenzialmente una carica elettrica che viene passata sulla superficie dello stampo. La tecnologia di rivestimento al plasma è nelle proprietà dello stampo che vengono modificate, creando una superficie più pulita e idrofila.

A sua volta, questo aiuta a produrre una lente costante nelle sue caratteristiche, più umettata e più confortevole.

DAYVUE *with BioMoist* 57



DISPONIBILE IN CONFEZIONE DA

30

LENTI A CONTATTO

PERCHÈ SCEGLIERLA

FORMULA
BIOMOIST

RIVESTIMENTO IN
LINEA AL PLASMA

TECNOLOGIA
RADIAL EDGE

GEOMETRIA
A 8 CURVE

MAGGIORE RESISTENZA AI
DEPOSITI PROTEICI E LIPIDICI

COMFORT AUMENTATO
PER TUTTA LA GIORNATA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE	METHAFILCON B con FILTRO UV
CONTENUTO IDRICO	57%
CURVA BASE	8.60 mm
DIAMETRO	14.30 mm
SPESSORE CENTRALE	0.10 mm (a -3.00Dt)
TINTA DI MANIPOLAZIONE	LEGGERMENTE AZZURRATA

GAMMA POTERI

da **-15.00 Dt** a **+6.00 Dt**


da -15.00 Dt a -6.50 Dt
(incrementi da 0.50)

da -6.00 Dt a +0.50 Dt
(incrementi da 0.25)

da +0.50 Dt a +6.00 Dt
(incrementi da 0.25)

DAYVUE ^{with} *BioMoist* 57

Superficie della lente modellata attraverso 8 curve, per massimizzare il comfort e garantire un movimento ottimale sull'occhio, a vantaggio del benessere oculare.

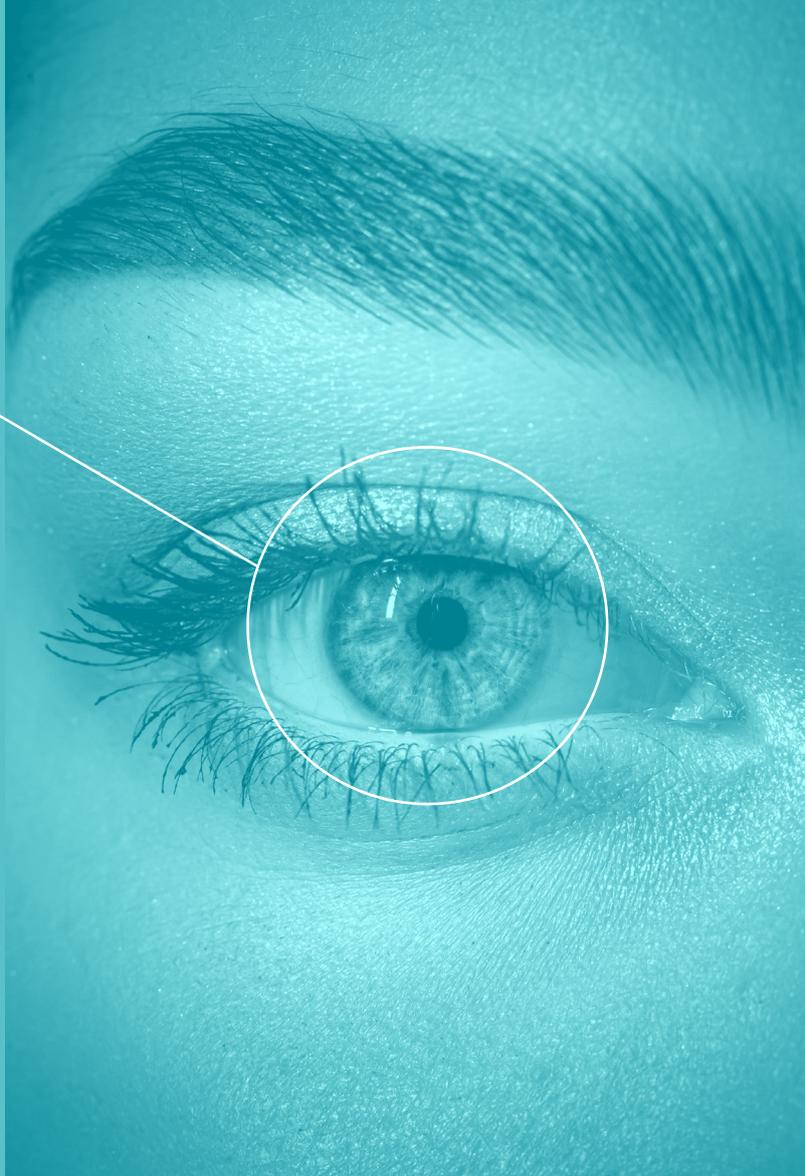

ZONA OTTICA

